

# **MANUAL DE USUARIO**

---



## **CardioLIFE**

# Índice

1. Introducción

2. Instalación y Acceso

3. Funcionalidades

- Inicio de Sesión
- Monitoreo de Ritmo Cardíaco
- Ubicación y Contactos de Emergencia
- Asistente de Salud
- Perfil del Usuario

4. Uso de la Aplicación

5. Recomendaciones de Uso

6. Preguntas Frecuentes

7. Contacto y Soporte

# Introducción

CardioLIFE es una aplicación diseñada para monitorear el ritmo cardíaco y detectar irregularidades en tiempo real. La app está conectada con un dispositivo biomédico y proporciona alertas en caso de emergencia. Está dirigida tanto a usuarios individuales como a empresas para el seguimiento de la salud de sus empleados.



# Instalación y Acceso

- Descarga la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo.
- Instala y abre la aplicación.
- Regístrate o inicia sesión con tu cuenta empresarial o personal.
- Conecta el dispositivo biomédico siguiendo las instrucciones en pantalla.




**CardioLIFE**

CardioLIFE


# Funcionalidades

## Inicio de sesión


- Accede con tu usuario y contraseña.
- Alternativamente, puedes iniciar sesión con Google o Apple.

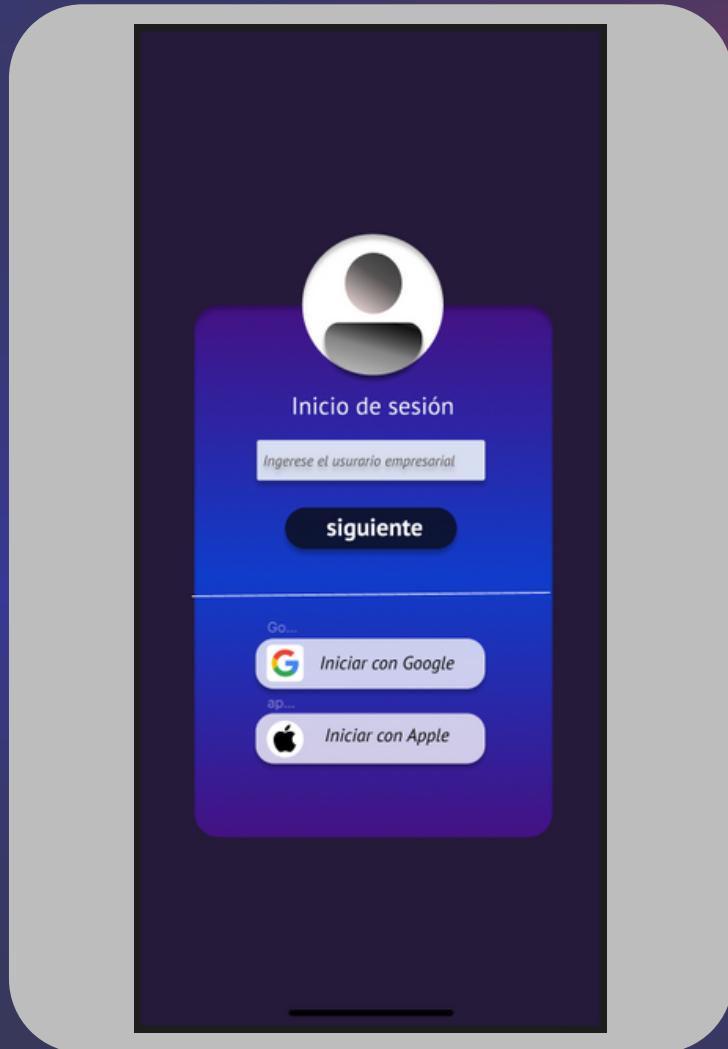


# Inicio con usuario

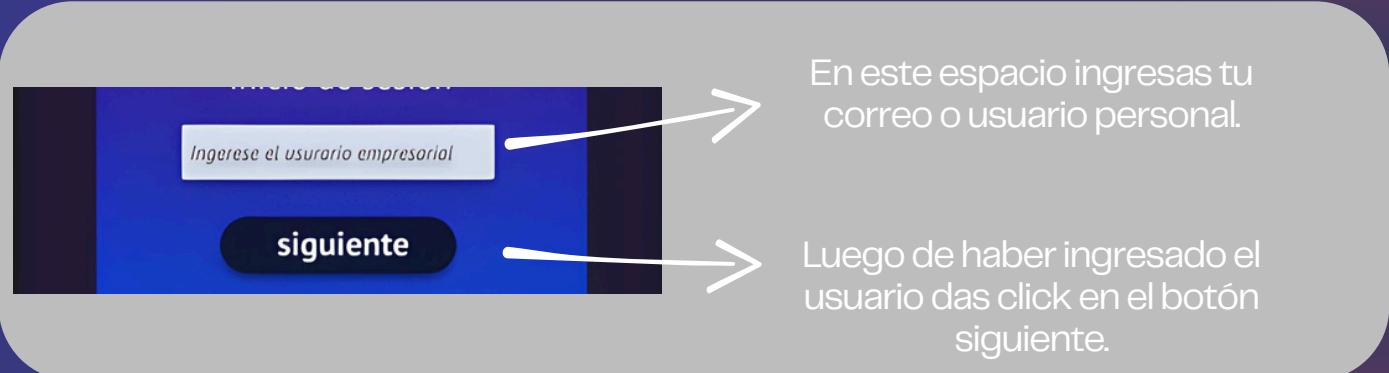

# Inicio con cuenta

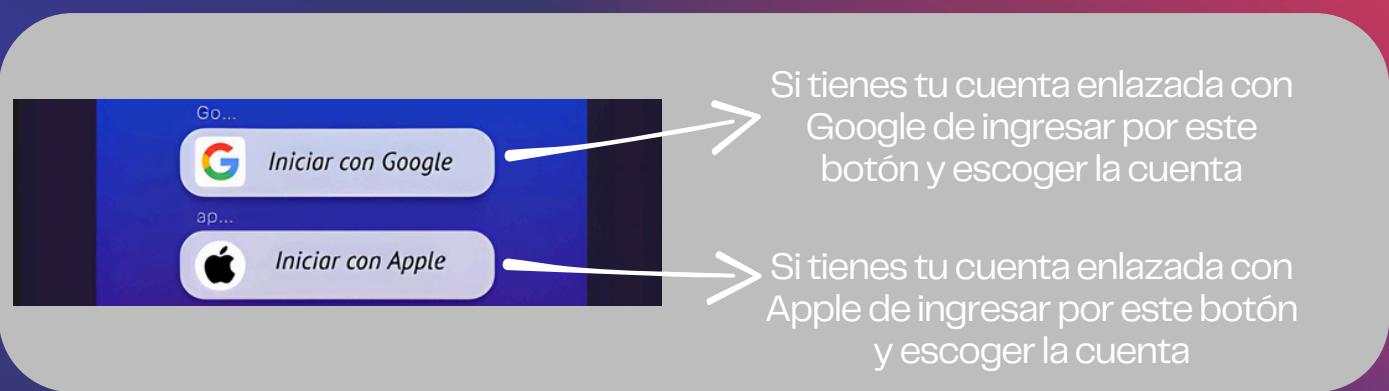

# Monitoreo de Ritmo Cardíaco

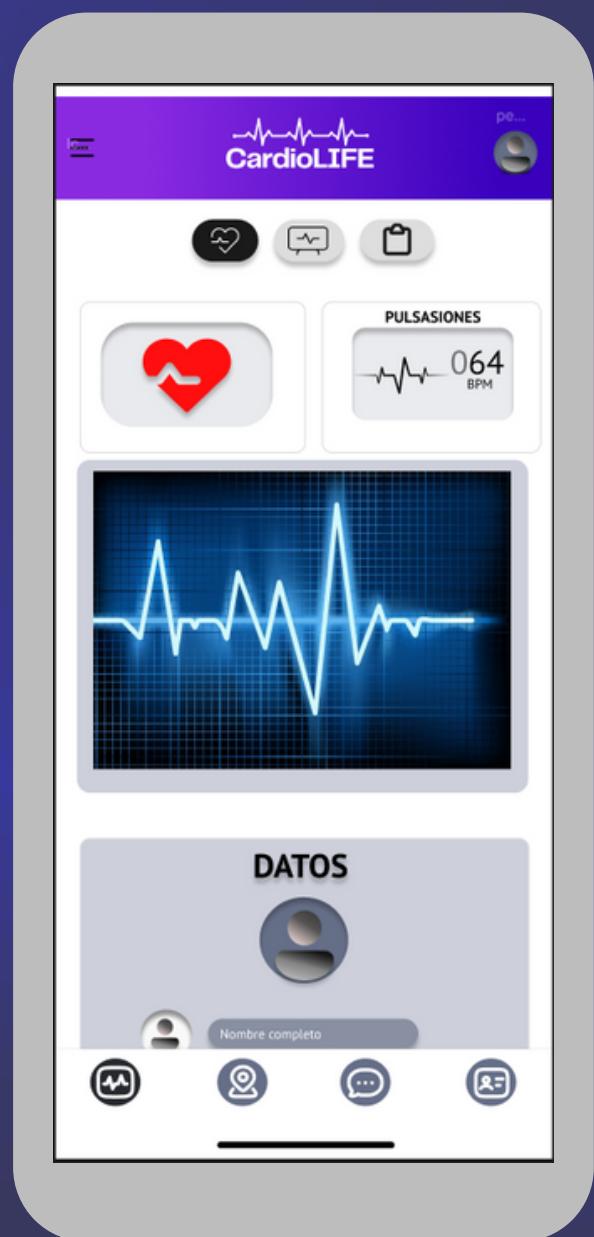

- La pantalla principal muestra tus pulsaciones en tiempo real.
- Un gráfico de electrocardiograma indica la actividad cardíaca.
- Sección de "Datos" con información personal y empresarial.

# Monitoreo de Ritmo Cardíaco




En la parte superior encontraras tres botones cada uno con una función diferente




Este icono te lleva a un apartado en donde encontraras el estado de tus pulsaciones:

→ El corazon por medio de color rojo y amarillo muestra el estado en donde ❤️ rojo es buen estado y ❤️ amarillo es que no esta normal el pulso

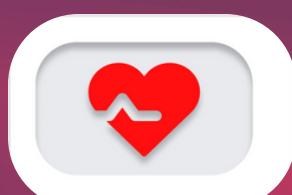

→ Este icono muestra en pantalla el apartado de las pulsaciones mediante una grafica

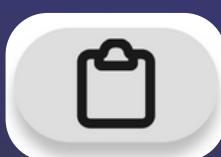


→ Este icono muestra una grafica de pulsos acompañada de una tabla de datos personales



DATOS

	Nombre completo
	Email
	Número de contacto
	Dirección


# Ubicación y Contactos de Emergencia

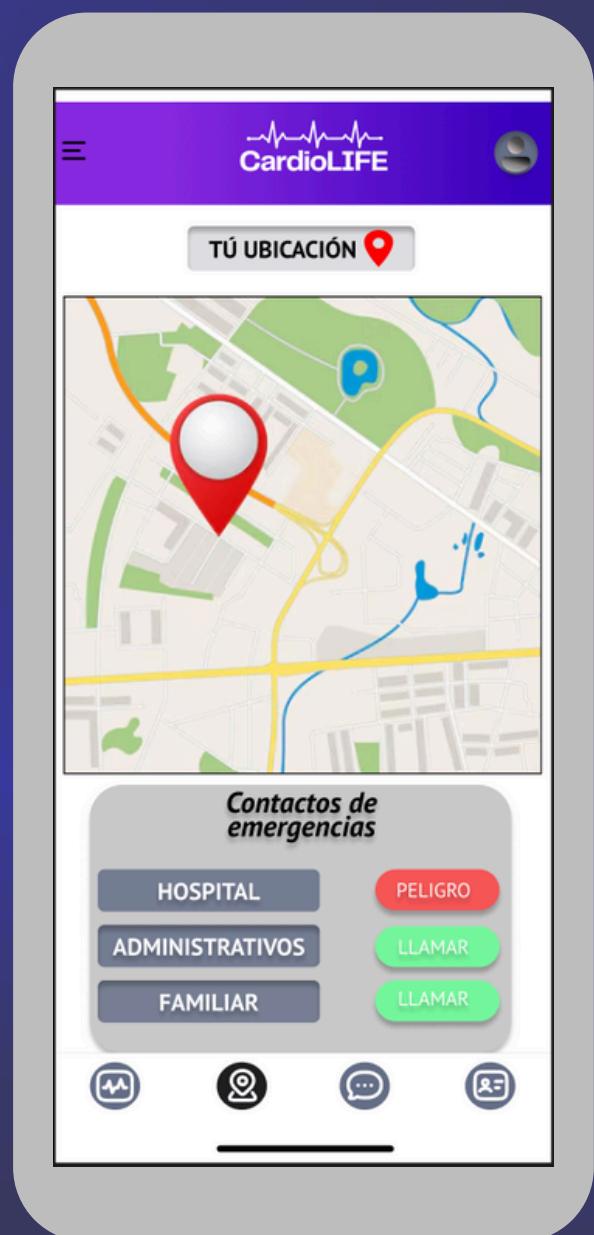

- La app muestra tu ubicación en tiempo real.
- Botones de emergencia para contactar:
- Hospital (en caso de emergencia crítica)
- Administrativos (si eres empleado de una empresa)
- Familiar (contacto de confianza)


# Ubicación y Contactos de Emergencia

En esta sección encontraras un apartado de tu mapa con ubicación actual

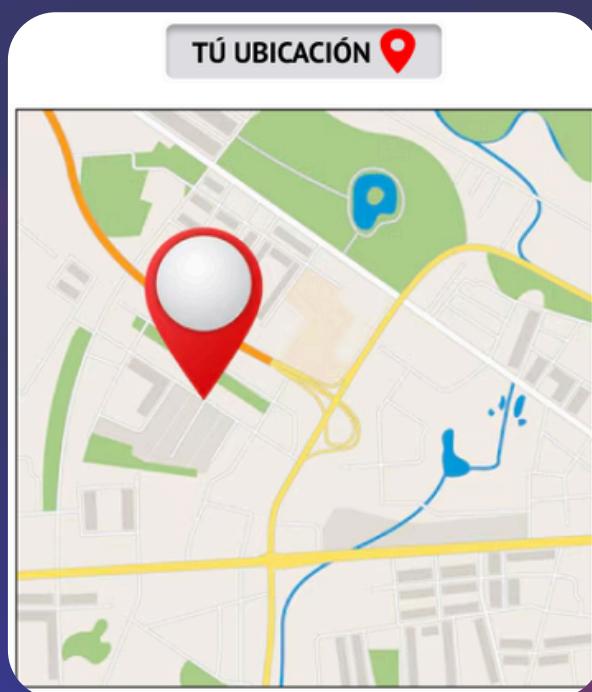

En la parte de abajo encontraras un recuadro con una información acompañados de un botón que dice llamar, punteando uno con el texto “PELIGRO” el cual es predeterminado para un caso extremo

# Asistente de Salud

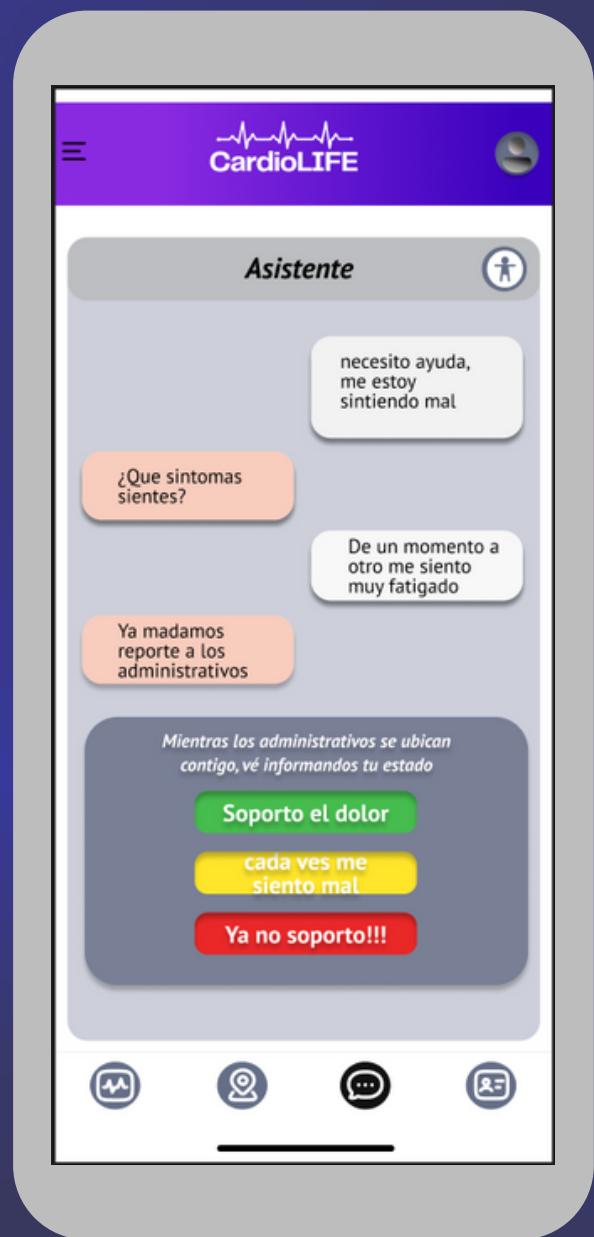


- Chat interactivo donde puedes indicar síntomas.
- La app sugiere acciones y alerta a los administrativos si es necesario.
- Escalado de síntomas:
- "Soporto el dolor"
- "Cada vez me siento mal"
- "Ya no soporto" (alerta automática a emergencias)


# Asistente de Salud

En este apartado podrás interactuar con un asistente que tiene respuestas predeterminadas basadas con con información clasificada bajo riesgos .

Contarás con tres botones basados en colores para que tu puedas informar sobre tu dolor a molestia, y poder hacer un reporte inmediato para que tengas una atención rápida y segura.

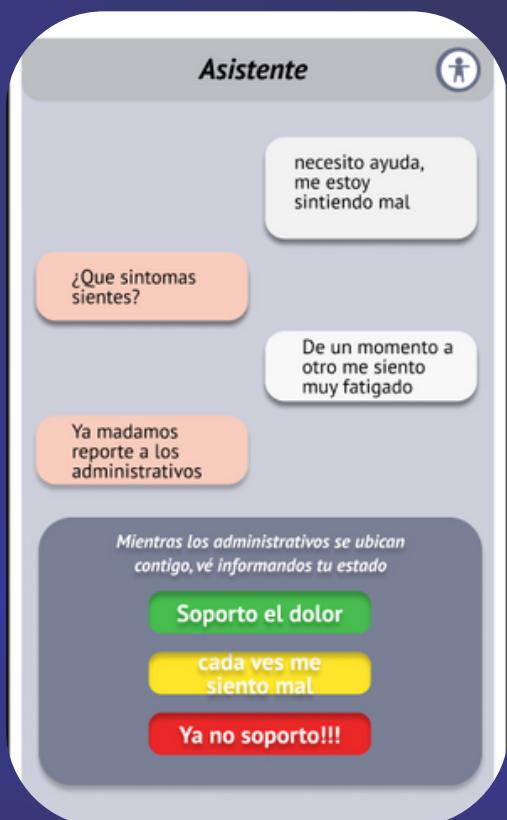

# Perfil del Usuario

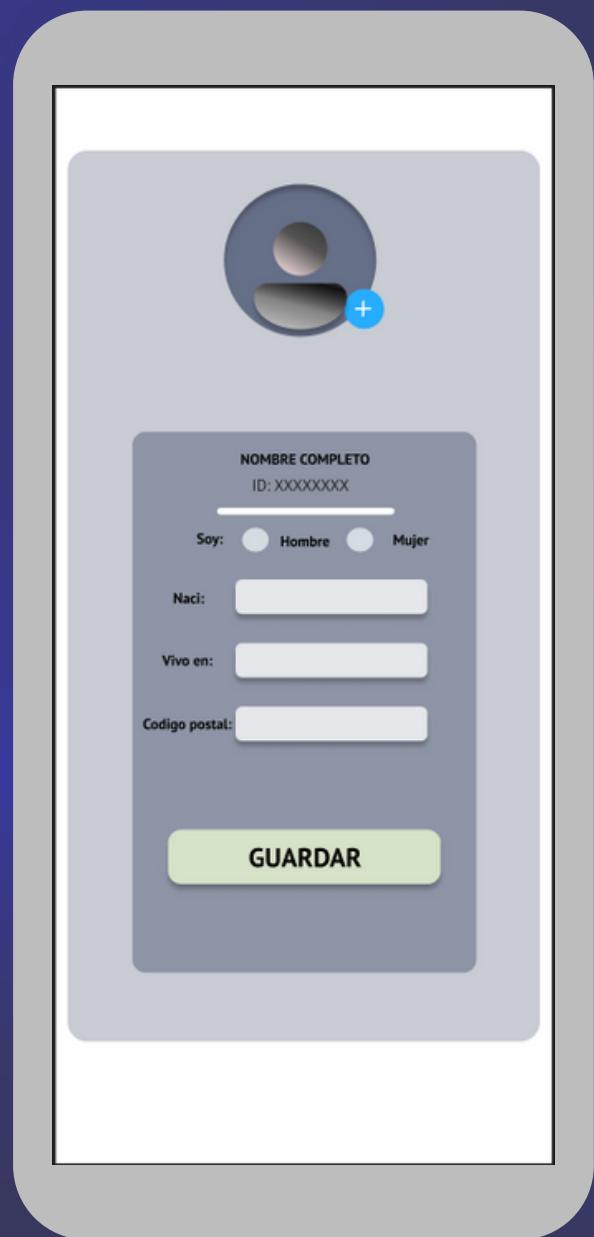

- Edita tu información personal.
- Agrega datos como nombre, correo, ID de empresa y dirección.
- Botón para guardar cambios.

# Uso de la Aplicación

- Revisión diaria: Consulta tu ritmo cardíaco regularmente.
- Emergencias: Usa los botones de llamada rápida.
- Registro de síntomas: Interactúa con el asistente para registrar tu estado de salud.
- Actualizar perfil: Mantén tus datos personales al día.

## Recomendaciones de Uso

- Asegúrate de que el dispositivo biomédico esté bien conectado.
- Activa la ubicación para una mejor asistencia en emergencias.
- Mantén la aplicación actualizada para mejorar su funcionamiento.



# Preguntas Frecuentes

## ¿La app funciona sin conexión a internet?

- La monitorización básica sí, pero las alertas y ubicación requieren internet.

## ¿Cómo configuro mis contactos de emergencia?

- En el apartado de configuración, puedes añadir y modificar contactos.

## ¿Qué hago si recibo una alerta de emergencia?

- Si es leve, sigue las recomendaciones de la app. Si es grave, usa el botón de llamada de emergencia.

# Contacto y Soporte

Para asistencia técnica, contáctanos en:

[soporte@cardiolife.com](mailto:soporte@cardiolife.com)

